

Reusable Cloth Mask
Pattern-Hack Instructions by, Kaili Reynolds
Pattern pieces from www.avera.org
Translated to Spanish by Joe Schirmer
All seams are $\frac{1}{4}$ inch. Seam allowances are already made.


Máscara de tela reutilizable
Instrucciones de pirateo de patrones por Kaili Reynolds
Patrones de piezas de www.avera.org
Traducido al español por Joe Schirmer(Google translate)
Todas las costuras son de $\frac{1}{4}$ de pulgada. Los márgenes de costura ya
están hechos



Step 1: Download and print pattern pieces face 1 & face 2 only

Paso 1: Descargue e imprima solo las piezas del patrón cara 1 y cara 2

<https://www.avera.org/app/files/public/76443/Olson-Mask-with-Pattern.pdf>

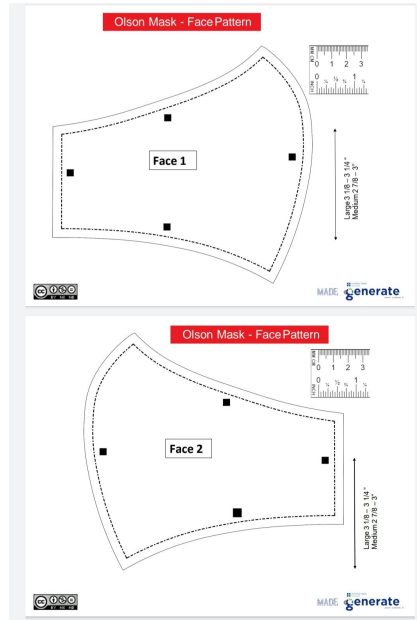

Step 2: Trace pattern onto **folded** cotton fabric (quilting or t-shirt fabric work best) and cut. You should have 4 pieces after cutting.

Paso 2: Trace el patrón sobre una tela de algodón doblada (la tela de acolchado o camiseta funciona mejor) y corte. Debes tener 4 piezas después del corte.



Step 3: Pin face piece 1 & face piece 2 right sides together and sew along curved edge. Top stitch only. Repeat step for the other two pieces.

Paso 3: fije la pieza frontal 1 y la pieza frontal 2 con los lados derechos juntos y cosa a lo largo del borde curvo. Puntada superior solamente. Repita el paso para las otras dos piezas.



Step 4: Pin the two large face pieces you just made, right sides together and sew along all edges **except one side.**

Leave one side open and then turn mask right side out when you are finished.

Do not sew all the way to any edge, make sure to leave $\frac{1}{4}$ inch from seam to edge of fabric. Cut extra fabric off corners once sewn.

Paso 4: fija las dos piezas faciales grandes que acabas de hacer, los lados derechos juntos y cose a lo largo de todos los bordes, **excepto un lado.** Deje un lado abierto y luego gire la máscara hacia afuera cuando haya terminado.

No cosa hasta el borde, asegúrese de dejar $\frac{1}{4}$ de pulgada desde la costura hasta el borde de la tela. Corte la tela extra de las esquinas una vez cosida.

Sew all edge except
this side!!



Step 5: After turning mask right side out, tuck in unsewn edge $\frac{1}{4}$ inch. Pull edges of mask through one hair band each. These will be worn on the ears. Pin edges down and sew. Make sure to back stitch & lock stitch as there will be a lot of tension when worn.

Paso 5: Después de girar la máscara hacia afuera, meta el borde sin coser $\frac{1}{4}$ de pulgada. Tire de los bordes de la máscara a través de una banda para el cabello cada uno. Estos serán usados en las orejas. Pin bordes hacia abajo y coser. Asegúrese de hacer la puntada hacia atrás y la puntada de bloqueo ya que habrá mucha tensión cuando se use.



Step 6: Wash or iron to prevent spreading germs to the owner of the mask. Instruct the owner to do the same before wearing. Good luck and be well!

Paso 6: Lave o planche para evitar la propagación de gérmenes al dueño de la máscara. Indique al propietario que haga lo mismo antes de usarlo. ¡Buena suerte y estar bien!

